



iboga智能身高测量仪C8

产品使用说明书

深圳市博家科技有限公司

包装清单

欢迎使用iboga智能身高测量仪C8,请确认您的包装中含有以下内容：


- ①产品主机 ×1
- ②产品使用说明书 ×1
- ③绒布袋 ×1
- ④TYPE-C充电线 ×1



微信扫码阅读在线使用说明书

注意：显示屏上的保护薄膜有划痕属于正常现象，您可撕去保护薄膜获取最佳体验。

产品示意图

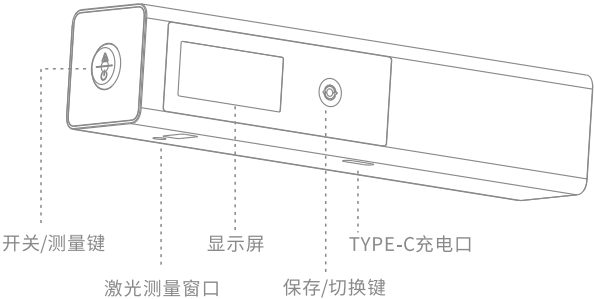

显示屏示意图




使用说明

开关机：

- 关机状态下，短按【开关/测量键】开机；
- 开机状态下，长按【开关/测量键】3秒关机；
- 开机状态下，如果3分钟内没有进行任何操作，自动关机。


身高测量：

- 开机，选择被测人；
- 被测人脱去鞋、帽，双脚靠墙并拢站立；
- 手持身高测量仪，将身高测量仪底部垂直紧贴墙面，激光发射窗一面朝下且贴紧被测人头顶，并保持在这种状态，然后被测人离开。如图①、图②所示。
- 如果被测人为婴幼儿无法站立，可以采取卧测的方式，需事先准备好硬质挡板或者书本，垂直立于脚底位置，此时需确保被测人躺值。如图③所示。

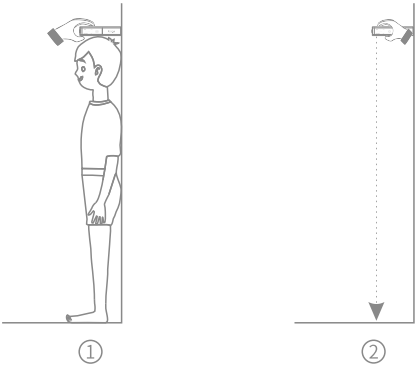

注：为了测量数据的一致性，建议固定测量场所，确保墙面垂直、地面为光洁的硬质地板。建议在地面上垫一张白纸以减少测量误差。

- 短按，【开关/测量键】，激光测量窗口发出激光，地面或挡板可见红点激光点。此时应避免让孩子直视激光测量窗口。如图④所示。
- 再次短按【开关/测量键】，会听到“滴”响，表示测量成功，显示屏显示测量数据。如果听到“滴滴”响，表示测量失败，需重新测量。测量失败的原因可能是激光测量窗口被遮挡，测量距离过远或过近。

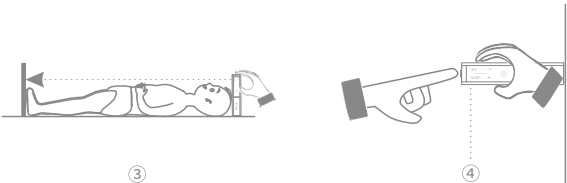

数据保存：

- 测量完成后，显示屏中显示的测量数据为闪烁状态，此时短按【保存/切换键】，则当前测量数据保存在身高测量仪中，同时反馈“滴滴”响。
- 如果闪烁超过10秒未按【保存/切换键】，则测量数据停止闪烁，无法再保存。闪烁过程中，短按【开关/测量键】，则放弃保存当前数据，重新开始测量。
- 为避免过多无效数据的干扰，如当日该被测人进行多次测量，则只保存当日最后一次测量数据。

数据存储状态指示：

- 显示屏左上角的XX/99为数据存储状态，XX表示当前已存储的测量数据条数，99表示最大存储量，当存储数据达到99条时，如仍需保存测量数据，则前一条测量数据将被覆盖。

被测人切换：

- 长按保存/切换键2秒，显示屏“8”符号旁边的数字将从1~4循环切换，对应4个被测人。
- 每次开机，默认切换至1号被测人。

本地存储数据清零：

- 同时长按开关/测量键+保存/切换键3秒，可将身高测量仪本地存储的测量数据条数清零。注：清零后数据不可恢复。

设备绑定：

- 使用微信扫码智能身高测量仪机身的二维码，点击同意相关协议条款后，注册“iboga身高管理小程序”。
- 登陆微信小程序后，系统提示需添加被测人（宝贝）信息，请准确输入宝贝的昵称、性别、生日和父母身高，点击“保存”。
- 在身高测量仪开机状态下，点击小程序页面中“我的”—“设备管理”—“搜索设备”，点击搜索到的设备，即可完成绑定。

注：绑定设备时，确保手机蓝牙和微信定位权限为打开状态，同时确保“iboga身高管理小程序”中设置栏内的蓝牙权限为“使用小程序时允许”状态。



微信扫码绑定设备

iboga身高管理小程序

宝贝管理：

- 点击小程序页面中“我的”—“宝贝管理”，可添加被测宝贝信息，要求准确输入性别、生日以及父母身高，以便提供更准确的身高发育等级评价。
注：最多可添加4个被宝贝。

数据添加：

- 点击小程序页面中“数据”—“新增”，可手动录入历史身高数据(如有)。

数据编辑：

- 在小程序端“数据”页面中，左拨身高数据，可删除或编辑身高数据。
注：删除或编辑后，原有数据不可恢复。

数据同步：

- 在身高测量仪开机状态下，点击小程序页面中“数据”—“同步”，则将身高测量仪本地存储的数据同步至云端，同步后，身高测量仪本地的测量数据条数清零。
注：同步时需确保手机端蓝牙连接为打开状态、设备为绑定状态。

测量单位切换：

- 点击小程序页面中“我的”—“设备管理”—“智能身高测量仪”—“单位”，可切换测量单位为厘米(cm)或英尺(小数ft)或英尺(分数ft)。

参考标准：

- 《中华人民共和国卫生行业标准WS/T 423-2022》，7岁以下儿童生长标准；
- 《中华人民共和国卫生行业标准WS/T 612-218》，7岁~18岁儿童青少年身高发育等级评价。

规格参数

产品型号：	C8
额定输入：	DC5V/1A
电池容量：	500mAh
激光等级：	Class I (1类)
最大量程：	2.3m
测量精度：	≤2mm
充电时间：	3h
产品尺寸：	32×32×150mm

保修卡

售后服务政策

- 自购买本产品之日(以实际收货日期为准)起,7天内无理由退换货(线下购买不支持无理由退换货),30天内质量问题包换。返厂维修送修时应自行妥善包装维修品,以免在运输途中造成损坏。
- 保修期:本产品整机质保1年。

产品发生以下情况时,属于非保修范围,需付费维修:

- 已超出质保期限;
- 因不可抗力造成的损失;
- 因碰撞,跌落,进液,拆动等人为原因造成的损坏;
- 超出正常使用条件造成的损坏。

售后服务指南:

- 关注“iboga”公众号或“iboga身高管理”小程序,在线申请售后服务;
- 通过购买产品的电商平台或经销商渠道,联系客服申请售后服务;
- 返厂维修送修时应自行妥善包装维修品,以免在运输途中造成损坏。

保修登记表	
用户姓名:	产品批号 (L/N):
通讯地址:	联系电话:
保修内容:	保修日期:
经销商信息:	经销商盖章:



微信扫码关注公众号

合格证

经检验,产品合格,准予出厂。

制造商:深圳市博家科技有限公司