



iboga智能体重体脂秤W8

产品使用说明书

深圳市博家科技有限公司

包装清单


欢迎使用iboga智能体重体脂秤W8,请确认您的包装中含有以下内容:

- ①产品主机 ×1
- ②产品使用说明书 ×1
- ③TYPE-C充电线 ×1



微信扫码阅读在线使用说明书

产品示意图

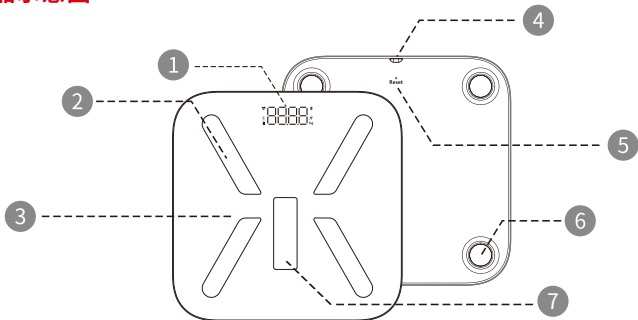

① 显示屏	显示测量的体重数据以及其他提示显示
② 电极片	测量身体的体脂等数据时,需要光脚上秤,正确接触的金属电极片
③ 玻璃面板	秤的承重面
④ 充电接口	用于充电的秤端TYPE-C接口
⑤ 复位孔	对于秤出现异常时进行复位
⑥ 秤脚	支撑秤体的部件
⑦ 测身高激光落点区	配合iboga身高测量仪使用时,需确保激光点落入此区域内

产品特点

身体数据：

体重、脂肪率、BMI、肌肉量、BMR、水分率、心率、脂肪量、蛋白质率、去脂体重、皮下脂肪率、骨骼肌率、内脏脂肪、肌肉率、肌肉控制量、脂肪控制量、理想体重、控制体重、骨量、身体类型、肥胖等级、健康评估、身体年龄、身体得分。

工作原理：

本产品是基于生物电阻抗法(BIA)原理工作。利用最新技术测量身体电阻，使测值结果更准确。用身体电阻抗法的依据是：身体脂肪不是导体，但是肌肉和水分是导体，通过测人体生物电阻来计算人体的组成成分。

注：因未成年人处于身体发育期，体脂等数据并不准确，建议未成年人仅做体重测量，成年人可选择小程序中的“成人体重管理”，跳转至更多身体数据的“Unique Life”小程序。

设置称重单位：

本产品在出厂时称重单位设置为“kg(千克)”，可以通过iboga小程序切换称重单位，本产品支持“kg(千克)/斤”两种单位。

测量脚长：

本产品的玻璃面板上印有脚长刻度线，有厘米(cm)和脚码两种单位，测量时，双脚并拢站立，且脚后跟对齐“基准线”，脚尖对准的刻度线即为脚长。

称重物品：

将本产品放置在坚硬的平台上，按压秤面可开机，等显示归零后，再放上物品称重。

使用方法

第一步：微信扫码小程序



将秤放置在
平台坚固的地面上



微信扫码打开iboga小程序



小程序端注册
填写个人信息

第二步：绑定设备



打开iboga小程序或
扫产品底部的二维码
—打开蓝牙—上秤



光脚轻踩秤面开机
显示数据后上秤



点击iboga小程序“我的”—
“设备管理”—“搜索设备”—
绑定设备，提示已绑定设备即可

第三步：上秤测量，查看测量数据



打开iboga小程序—
打开蓝牙—选定被测人



光脚上秤，
保持不动




测量成功数据自动上传
至选定的被测人目录下

正确的测量方法：

请将产品放在坚硬平坦的地板，请勿放置在地毯或者其他软质地面，否则将引起测量数据不准确。

每次测量前对显示重量清零。清零方法：轻踩秤面后下秤，屏幕数字会自动回到0.0kg。

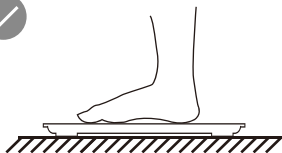


把秤放置在坚硬平坦的地板




不要放置在地毯或软质地板

正确的站立方法：

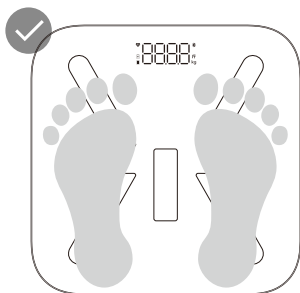

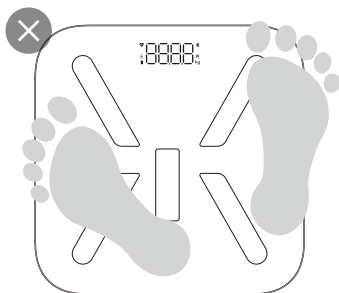

赤脚上秤，且确保左右脚都能
纵跨踩到两块电极片



双脚距离过大未踩到电极片
或者靠近边缘导致测量不准

显示说明

 <p>正常体重显示</p>	 <p>秤与手机未连接上蓝牙 蓝牙图标闪烁</p>	 <p>测脂时“----”从上中下显示</p>
 <p>超载显示</p>	 <p>低电量显示</p>	 <p>心率测量失败显示</p>
 <p>充电时显示</p>	 <p>充满电显示</p>	 <p>心率测量中显示</p>

手机设备要求

OS系统要求iOS 10.0及以上。

Android设备系统要求Android 5.0及以上，蓝牙要求4.0。

规格参数

产品型号:	CF618BLE
额定输入:	DC5V/1A
电池容量:	500mAh
称量单位:	kg/斤 (默认为kg)
量程范围:	0.1-180kg
分度值:	0.05kg
充电时间:	3h
产品尺寸:	280×280×25mm

注意事项

感谢您选用iboga智能体重体脂秤W8,搭配iboga小程序使用,能够让您获得更多的身体数据,更有利于做健康管理。在使用本产品前,请仔细阅读如下注意事项:

- 戴起搏器或体内有其他器械的用户,不建议使用本产品。
- 为保证能够准确的测量到心率,请在测量前确保双脚湿润(在冬季测量时,请使用湿毛巾拭擦电极片后测量)。
- 上秤时请保持光脚清洁。
- 测试结果仅供参考,请勿作为您节食或健身运动计划的依据。
- 请勿在湿滑或软质地面上使用。
- 请勿站在秤边跳跃到秤面上,以免摔伤。
- 请勿让小孩移动本产品,以免受伤。
- 为保持数值最佳,请在每天同一时间测量。
- 请勿在剧烈运动后使用本产品。
- 请勿用水清洗或挥发汽油擦洗本产品。
- 孕妇不建议使用。

售后服务政策

自购买本产品之日(以实际收货日期为准)起,7天内无理由退换货(线下购买不支持无理由退换货),30天内质量问题包换。返厂维修送修时应自行妥善包装维修品,以免在运输途中造成损坏。

保修期:本产品整机质保1年。

产品发生以下情况时,属于非保修范围,需付费维修:

- 已超出质保期限;
- 因不可抗力造成的损失;
- 因碰撞,跌落,进液,拆动等人为原因造成的损坏;
- 超出正常使用条件造成的损坏。

售后服务指南:

- 关注“iboga”公众号或“iboga”小程序,在线申请售后服务;
- 通过购买产品的电商平台或经销商渠道,联系客服申请售后服务;
- 返厂维修送修时应自行妥善包装维修品,以免在运输途中造成损坏。

保修卡

保修登记表	
用户姓名:	产品批号 (L/N):
通讯地址:	联系电话:
保修内容:	保修日期:
经销商信息:	经销商盖章:

合格证

产品名称: iboga智能体重体脂秤W8

产品型号: CF618BLE

执行标准: Q/LFHQ001

检 验 员:

日 期:

制 造 商: 深圳市博家科技有限公司

产 地: 中国·深圳

本产品经检验合格，准予出厂



微信扫码关注公众号